

SID & CUSPID

SYSTEM INTERNAL DENTIN & CUSPID DENTIN

- www.naturalceramic.eu - www.naturalceramic.it - www.naturalceramic.com - www.naturalceramic.it -



DENTAL CERAMIC



ITALIAN STYLE

Natural SiD & Cuspid Dentin

MASSE SPECIALI PER STRATIFICAZIONE ESTETICA

Masse dentinali ad intermedia opacità, create per la stratificazione interna e per la realizzazione di sorprendenti effetti naturali in profondità, replicando fedelmente la colorazione naturale dei denti.

Utilizzate come prima cottura nelle aree dentinali, abbinano un'ottima cromaticità in pochissimo spazio ad una grande stabilità nelle cotture successive.

Indispensabili nelle ricostruzioni con poco spazio, rendono il restauro vivo e cromatico garantendo al contempo una buona copertura della struttura.


Eccezionale effetto tridimensionale nella tecnica della stratifica Live 3 Dimension.

Colorazione cromatica scala A-D.

Consigliato l'abbinamento con la sistematica THE ONE, per creare l'illusione della stratificazione tradizionale ed una tonalità profonda molto naturale.

Le masse SID e CUSPID sono disponibili per tutte le ceramiche della linea Natural: LF, HT e ZiR.

Natural Ceramic System, qualità e innovazione al servizio dell'arte odontotecnica.

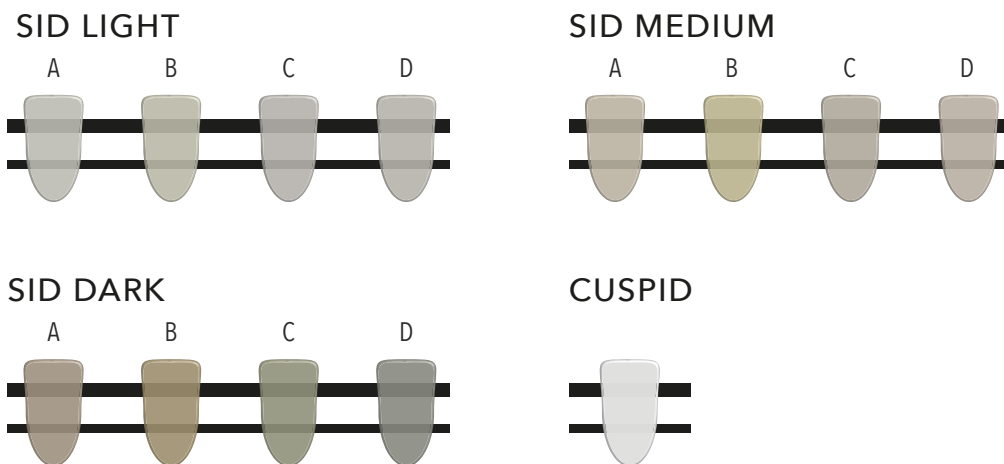

Natural CUSPID DENTIN

MASSA DENTINALE NEUTRA

La massa dentinale Cuspid Dentin permette di caratterizzare le aree incisali e le cuspidi degli elementi durante stratificazione delle masse SiD.

La Cuspid Dentin può inoltre essere utilizzata per desaturare o modificare le masse SiD, in qualsiasi proporzione (si consiglia la realizzazione di un campione).

Utilizzata pura è una massa acromatica altamente luminosa.

La massa Cuspid Dentin è disponibile per ciascuna linea Natural: LF, HT e ZiR.



Natural SYSTEM INTERNAL DENTIN

SID - MASSE DENTINALI CROMATICHE

Le masse dentinali System Internal Dentin, o più brevemente SID, sono disponibili in tre differenti gradi cromatici (LIGHT, MEDIUM e DARK) per ciascuna famiglia di colore della scala A-D.

Si consiglia l'utilizzo delle masse SID per realizzare una stratificazione estetica in presenza di spazi molto sottili: con le SID DENTIN infatti è possibile creare aree dentinali con una buona copertura della struttura e dell'opaco.

L'utilizzo della masse SID DENTIN può essere suddiviso nel seguente modo:

- LIGHT per le tonalità più chiare, giovani e luminose;
- MEDIUM per le tonalità intermedie, sature e anziane;
- DARK per le tonalità più scure, molto cromatiche e molto anziane.



Natural[®]

CERAMIC
SYSTEM



Natural Ceramic System è la gamma più completa di ceramiche dentali per il successo del tuo laboratorio

Natural Ceramic System is the most complete range of dental ceramics for the success of your laboratory

DSL lingotti di silicato di litio per pressata

DSL pressable lithium silicate ingots

HT ceramica per leghe tradizionali, adatta alla stratifica su struttura in lega e alla pressata in ceramica integrale

HT ceramic for traditional alloys, suitable for layering on alloy frame and pressing full ceramic restorations

LF ceramica per leghe universali, adatta alla stratifica e alla pressata su struttura in lega e ceramica integrale

LF ceramic for universal alloys, suitable for layering and pressing both on alloy frame and full ceramic restorations

ZiR ceramica speciale per zirconio e silicato di litio per stratifica e pressata sia su zirconio sia in ceramica integrale

ZiR special ceramic for zirconia and lithium silicate for layering and pressing both on zirconia frame and full ceramic restorations

STAINS supercolori in polvere e pasta universali, luminosi e lucidi, altamente fluorescenti

STAINS universal, bright and glossy, highly fluorescent powder and paste stains

GLAZE FX una gamma completa di materiali per glasura: polvere, pasta, pasta fluorescente e spray fluorescente

GLAZE FX a full array of glazing materials: powder, paste, fluorescent paste and fluorescent spray

MASTER SET masse colorate per colori fuori scala A-D

MASTER SET advanced shades for off-scale colors A-D

MONO-LAYER The One è l'originale ceramica mono-massa per leghe e zirconio

MONO-LAYER The One is the original mono-layer ceramic for alloys and zirconia

MICRO-LAYER polveri e paste speciali per micro-stratificazione su silicato di litio e zirconia integrale

MICRO-LAYER special powders and paste for micro-layering on lithium silicate and full contour zirconia

CRYSTAL set completo di paste speciali per micro-stratificazione su zirconia, silicato di litio e leghe-ceramiche tradizionali

CRYSTAL special ceramic pastes for micro-layering on zirconia, lithium silicate and traditional alloys-ceramic

Natural Ceramic System: ceramica dentale, stile italiano

Natural Ceramic System: dental ceramics, italian style

- www.naturalceramic.eu - www.naturalceramic.it - www.naturalceramic.com - www.naturalceramic.it -

 **TRESSIS ITALIA srl**

viale Italia, 194
31015 Conegliano (TV) ITALIA

TEL: (+39) 0438 41 83 16

WEB: www.tressis.it

MAIL: tressisitalia@gmail.com



DISTRIBUTED BY: