



Natural **DSL**

Natural **HT**

Natural **LF**

Natural **ZiR**

DSL
Natural HT
LF
ZiR

ENAMEL SPECIAL

SMALTI SPECIALI PER STRATIFICAZIONE MASTER

- www.naturalceramic.eu - www.naturalceramic.it - www.naturalceramic.com - www.naturalceramic.it -

 tressis italia®

DENTAL CERAMIC



ITALIAN STYLE

Natural ENAMEL SPECIAL

SMALTI SPECIALI

Le masse Smalto Speciale sono masse incisali altamente caratterizzanti, realizzate per creare zone altamente personalizzate per mezzo della modulazione del valore, dell'opalescenza e la diffusione della luce.

Enamel Special ES

SMALTO SPECIALE ES - MADREPERLA

Sviluppato in collaborazione con l'odontotecnico Enrico Simonetti, di cui porta il nome, lo Smalto Speciale ES è una massa di stratificazione specifica per aree incisali.



La composizione dello Smalto Speciale ES combina un leggero effetto di profondità e un effetto molto forte di traslucenza (diffusione della luce) all'interno dell'elemento stratificato.

Il risultato è un effetto molto naturale e ideale per realizzare, stratificato a contrasto, effetti di profondità nel margine incisale, mantenendo alto il valore.

Per queste sue caratteristiche, lo Smalto Speciale ES è indicato nella caratterizzazione di elementi molto luminosi, giovani e chiari.

Lo Smalto Speciale ES è disponibile per tutte le linee di ceramica Natural, LF, HT, ZIR; ed è compatibile con la sistematica Natural THE ONE.

Enamel Special FB1

SMALTO SPECIALE FB1 - ALTA LUMINOSITÀ

Sviluppato in collaborazione con l'odontotecnico Foresi Beniamino, di cui porta il nome, lo Smalto Speciale FB1 è una massa di stratificazione specifica per aree incisali.



La formulazione unica dello Smalto Speciale FB1 combina alla luminosità dell'effetto opalescente una elevata traslucenza e profondità.

Il risultato è molto naturale, l'ideale, quindi, per la realizzazione di effetti tridimensionali, di profondità nel margine incisale, pur mantenendo, al contempo, alto il valore.


Per queste sue caratteristiche, lo Smalto Speciale FB1 è particolarmente indicato nella realizzazione di denti giovani e di restauri molto luminosi.

Lo Smalto Speciale FB1 è disponibile per tutte le linee di ceramica Natural, LF, HT, ZIR, ed è compatibile con la sistematica Natural THE ONE.

Enamel Special IOPAL

SMALTO SPECIALE IOPAL - ALTA OPALESCENZA

Lo Smalto Speciale IOPAL è una massa incisale sviluppata per creare effetti speciali incisali altamente luminosi e vivaci; il risultato è un effetto speciale che aumenta l'effetto opalescente, modificando luminosità e brillantezza con tonalità blu e arancio.

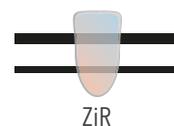

Lo Smalto Speciale IOPAL è l'ideale per creare tridimensionalità e traslucenza nelle aree incisali, aumentando la diffusione della luce e l'effetto traslucente.

Consigliato per realizzare gli elementi più giovani e luminosi, può essere impiegato anche a contrasto negli elementi più anziani per creare degli effetti tridimensionali.

Lo Smalto Speciale IOPAL può essere usato sia puro per aumentare l'effetto opalescente, sia a contrasto con altri smalti per ottenere effetto e profondità tipici dei denti naturali.

Lo Smalto Speciale IOPAL può essere mescolato con le masse Natural ZiR come smalti, trasparenti, trasparenti colorati, trasparenti del colletto etc. per aumentare l'opalescenza e la brillantezza delle masse ed è compatibile con la sistematica Natural THE ONE ZiR.

Enamel Special LUNE

SMALTO SPECIALE LUNE - GRIGIO VIOLA

Sviluppato in collaborazione con l'odontotecnico Luca Nelli, di cui porta il nome, lo Smalto Speciale LUNE è una massa di stratificazione specifica per aree incisali.



La resa estetica dello Smalto Speciale LUNE abbina una tonalità violetto ad una elevata profondità, rendendo questa massa perfetta per la valorizzazione delle aree incisali soprattutto nei gruppi di colore A e B.

Il risultato è molto naturale, l'ideale, quindi, per la realizzazione di effetti tridimensionali, di profondità nel margine incisale, creando aree di profondità non troppo marcate, ma molto visibili.

Per queste sue caratteristiche, lo Smalto Speciale LUNE è indicato nella realizzazione di elementi in tonalità A e B, in cui aumenta l'effetto di profondità incisale grazie alla colorazione complementare rispetto alle basi cromatiche.

Lo Smalto Speciale LUNE è disponibile per tutte le linee di ceramica Natural, LF, HT, ZiR; ed è compatibile con la sistematica Natural THE ONE.

Enamel Special METEORITE

SMALTO SPECIALE METEORITE - GRIGIO COMPLESSO

Lo Smalto Speciale METEORITE è una massa di stratificazione tipo incisale dall'effetto molto intenso e deciso: ha un colore grigio complesso molto marcato, dal valore molto basso, con intensi riflessi blu e arancioni.



Lo Smalto Speciale METEORITE è l'ideale per realizzare le parti incisali in moltissimi casi altamente caratterizzati: pazienti molto anziani con denti dal valore molto basso; colorazioni tipo "tetraciline"; colori bassi di valore come ad esempio accaniti fumatori.


Lo Smalto Speciale METEORITE inoltre può essere utilizzato anche nei lavori di tutti i giorni: nelle aree dentinali e incisali per abbassare il valore e creare grande profondità; nelle aree interprossimali a contrasto con altri smalti più luminosi per aumentare l'effetto di tridimensionalità e movimento; con la tecnica a contrasto con altri smalti per aumentarne la resa e gli effetti.

Lo Smalto Speciale METEORITE è disponibile per tutte le linee di ceramica Natural, LF, HT, ZIR, ed è compatibile con la sistematica Natural THE ONE.

Enamel Special OPAL

SMALTO SPECIALE OPAL - OPALESCENTE

Lo Smalto Speciale OPAL è una massa incisale sviluppata per dare un tocco di naturalezza in più, nella stratificazione estetica: il risultato è un effetto individuale che aumenta le caratteristiche di luminosità e brillantezza con una resa altamente opalescente.

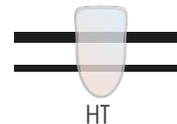

Lo Smalto Speciale OPAL è perfetto per creare aree opalescenti tridimensionali e traslucenti nelle aree incisali e nelle fasce approssimali.

Consigliato per la realizzare gli elementi più giovani, può essere impiegato a contrasto negli elementi più anziani per creare degli effetti vivaci e vitali: inoltre lo Smalto Speciale OPAL può essere usato sia puro, per creare effetti altamente opalescenti e distintivi, sia a contrasto con altri smalti per ottenere contrasti e profondità tipici dei denti naturali.

Lo Smalto Speciale OPAL può essere mescolato con le masse Natural da stratificazione come smalti, trasparenti, incisali e trasparenti colorati; inoltre è compatibile con la sistematica Natural THE ONE HT.

- www.naturalceramic.eu - www.naturalceramic.it - www.naturalceramic.com - www.naturalceramic.it -

 **TRESSIS ITALIA srl**

viale Italia, 194
31015 Conegliano (TV) ITALIA

TEL: (+39) 0438 41 83 16

WEB: www.tressis.it

MAIL: tressisitalia@gmail.com



DISTRIBUTED BY: